

 **QLICKSMART®**
BladeSINGLE
I | Klingenentferner



Schütze Dich -

Sichere Klingenentfernung

▲ Vergessene Stich- und Schnittverletzungen

Die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Skalpell zu verletzen, ist 200 Mal höher als eine Stichverletzung durch Nadeln oder Kanülen. Besonders häufig sind Schnittverletzungen im chirurgischen Bereich. Leider wurde dieses Risiko bisher von vielen Anwendern, aber auch von der Verwaltung in Kliniken und Krankenhäusern erheblich unterschätzt.

Skalpellschnitte können jeden betreffen, egal wie erfahren Sie im Umgang mit Skalpellen sind. Stich und Schnittverletzungen können Infektionen, durch Blut übertragene Krankheiten und nicht zuletzt psychische Belastung nach sich ziehen. Schwerere Schnitte erfordern möglicherweise einen mikrochirurgischen Eingriff, um verletzte Arterien, Nerven und Sehnen in den Fingern zu reparieren.

Viele Skalpellverletzungen lassen sich mit Qlicksmart BladeSINGLE, dem weltweit zukunftsweisenden Klingentferner mit Einhandbedienung, mühelos vermeiden.




Keine Berührung



Keine Berührung



Keine Wiederummanteln

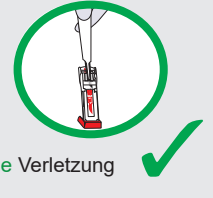

Keine Verletzung

▲ Der weltweit zukunftsweisende Klingentferner mit Einhandbedienung



KlemmeBladeSINGLE ist die perfekte Lösung für kleine chirurgische Eingriffe. Mit BladeSINGLE können Skalpellklingen einzeln entfernt werden - für exakte Zählung und effiziente Entsorgung.




Mit BladeSINGLE lassen sich gebrauchte Skalpellklingen mit schnellem „Drücken - Klick - Ziehen“ bequem entfernen und sicher aufbewahren.



Anwenderfreundliche Lösung als kostengünstige Alternative zu Sicherheitsskalpellen



In Kombination mit berührungsfreien Übergabetechniken kann BladeSINGLE bis zu fünfmal mehr Verletzungen verhindern als ein Sicherheitsskalpell.

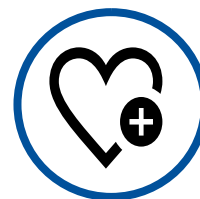

Mit BladeSINGLE können Chirurgen auch weiterhin ihre bevorzugten Standardmetallgriffe verwenden.



Weltweit findet das kostensparende System mit einzigartiger Doppelfunktion, das sich einfach in Behandlungseinheiten integrieren lässt, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen sehr positiven Anklang

Beschäftigte im Gesundheitswesen haben Anspruch auf Sicherheit am Arbeitsplatz - ein Anspruch, der alle Arbeitgeber verpflichtet
Schaffen Sie mit Qlicksmart BladeSINGLE mehr Sicherheit.

Spezifikationen

Artikelnummer	QSBS01	
Code GMDN	46236	
Kapazität	Jede BladeSINGLE Einsteckhülse fast 1 Klinge.	
Kompatible Klingen & Griffe*	Griffe: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Barongriff, zylindrische Griffe Klingen: #10, 10a, 11, 11P, 12, 14, 15, 15a, 15c, 16, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 25a, 27, 36, 6, 9, E11, Sabre D/15.	
Inkompatible Klingen & Griffe	Beaver Griffe, Einweggriffe	
Masse (pro Einheit)	Geschlossen: Länge 9.3cm Breite 2.2cm Dicke 0.9cm	Stehend: Länge 7.3cm Breite 2.2cm Höhe 9.3cm
Gewicht (pro Einheit)	< 10g	

Material	Polypropylen (PP)
Latex	Nein
DEHP	Nein
Sterile	Ja
Sterilisation	Gammabestahlung oder EtO
Wiederverwendbar	Nein
Entsorgung	Als medizinischer Abfall in einem Behälter für spitze und scharfe Gegenstände
Zulassungen	Australien – Genehmigung TGA ARTG NO: 134623 USA – FDA-Zulassung Europa – Steriles Medizinprodukt der Klasse I – Richtlinie 93/42/EEC und CE-Kennzeichnung


* Qlicksmart BladeSINGLE ist mit den meisten Marken kompatibel.

Hinweise zur Anwendung von BladeSINGLE

BladeSINGLE
| | Klingentferner

VORBEREITUNG BEIDHÄNDIG:

- Schutzfolie des Klebestreifens abziehen.

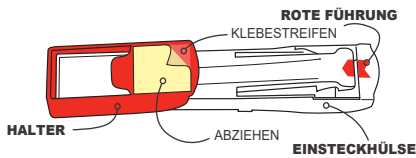

- Einsteckhülse aus dem Halter ziehen.



- Halter auf Abdeckung oder flacher Oberfläche befestigen




ANKLEBEN

- In den Halter stellen.


EINSATZBEREIT

AKTIVIERUNG EINHÄNDIG:


- Skalpellspitze einhändig in die Einsteckhülse schieben.

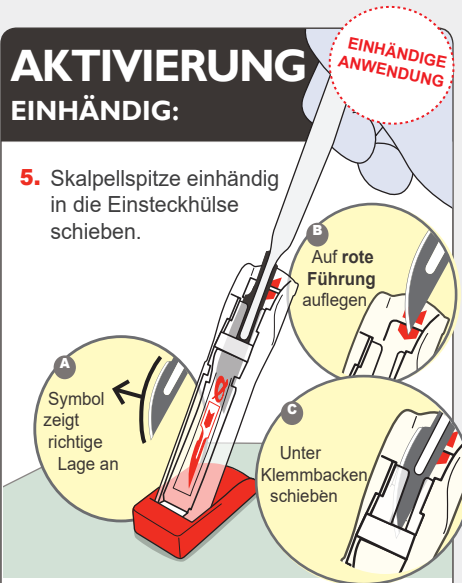

- Aufrichten und dann nach unten drücken.

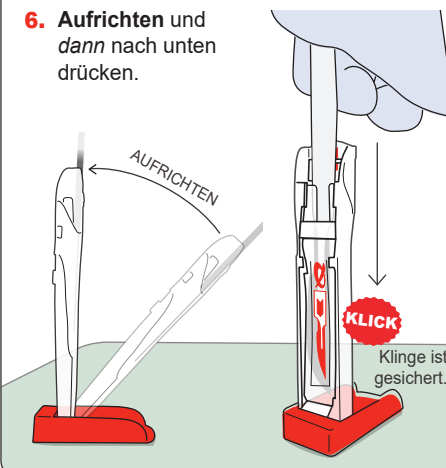

- Einsteckhülse aus dem Halter ziehen

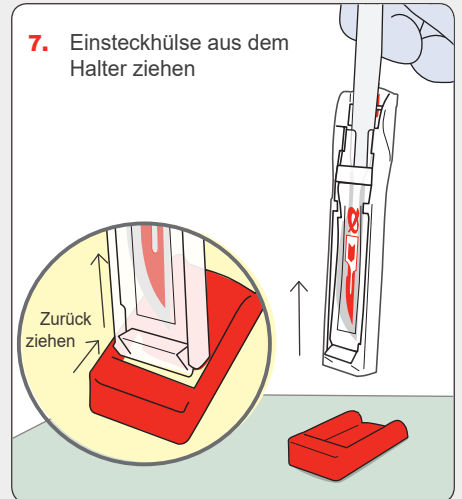

SICHER FÜR BEIDE HÄNDE:

- Skalpellsgriff herausziehen.



- In der Hülse lassen sich die Klingen sicher zählen und später entsorgen.

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australien

Vertrieb:



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Bleiben Sie in Kontakt

